

MS3-MaxiOrbit300 Orbital alkalayıcı

MS3-MaxiOrbit300 orbital alkalayıcı kompakt bir grnme sahip olarak tasarlanmıřtır. Farklı endstrilerde eřitli karıřtırma uygulamaları iin kullanılır. Molekler biyoloji, mikrobiyoloji, ummunoloji, biyoteknoloji, kimya vb. farklı laboratuvarlarda kullanılmaktadır.

Uzun mrl ve bakım gerektirmeyen Fırasız DC motor, alıřması sessiz ve stabildir.

Kontrol paneli gstergesinden hız ayarı yapılır.

Kompakt ve temiz tasarıma sahip LED gstergeler zerinden zaman ve hız grntlenebilmektedir.

MS3- MaxiOrbit300 Orbital alkalayıcı 1dk - 100h aralıęında isteęe baęlı olarak ayarlanabilen zamanlama fonksiyonuna sahiptir. Zaman kontrolcs, insansız alıřmayı gerekleřtirerek otomatik olarak alarm verebilir ve zaman zaman srekli alıřacak řekilde ayarlanabilir.

Opsiyonel seime baęlı olarak farklı numuneler iin konik flask, erlenler, tpler ve dięer rnek kapları iin farklı platformlara sahiptir.



Opsiyonel platformlar




Erlen tutucu ile birlikte platform
MP250-6




Universal platform,
Ayarlanabilir bar ile birlikte
MUP-12



Erlen tutucu ile birlikte platform
MP100-12

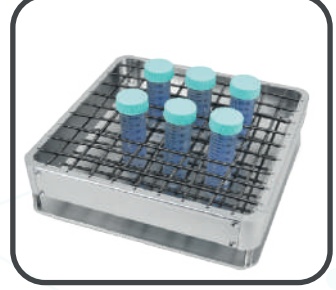

Universal platform
Yaıly rack ile birlikte
MP-SPR

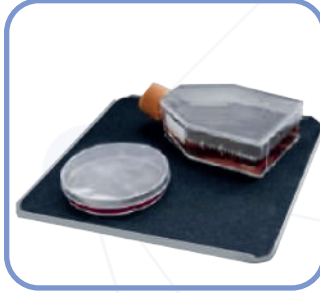

Düz platform Kaymaz
kauçuk mat ile birlikte
MP-RM-4



Çift katlı Düz platform
Kaymaz kauçuk
mat ile birlikte
MP-RM-4D



Yapışkan(Sticky)
ped MSP-STC
MP-RM-4 yada MP-RM-4D ile
birlikte kullanılabilir



Özellikler	MS3-MaxiOrbit300
Çalkalayıcı hız aralığı	50-300 rpm
Çalkalama metodu	Orbital çalkalama
Çalkalama orbit uzunluğu	20mm
Dijital zaman kontrol aralığı	1dk-99sa59dk
Kapasiteler	6 x 250ml erlen flask 12 x 100ml erlen flask 4 x mikroplate
Maksimum yükleme kapasitesi	3kg
Voltaj	AC 220-230V, 50/60Hz
Güç	50W
Sigorta	250V, 1A , Ø5x20
Boyutlar, Genişlik x Derinlik x Yükseklik	284x264x108 mm
Net ağırlık	5,6 kg